# 近代物理实验报告 4.1: 西蒙气体温度计与蒸汽压温度计

xy 学号 匡亚明学院 2019 年 2 月 29 日

### 1 引言

西蒙气体温度计是一种测温范围广、结构简单、使用方便的定容气体温度计,常用于一般低温工程技术。它和用于热力学温度标准的精密气体温度计相比,主要是测量精度存在差距而在测量原理上并无多大差别。蒸气压温度计则广泛应用于低温实验室的温度测量及控制,它具有反应快、准确性好、简单方便的优点。在低温实验室用得最普遍的是氦、氧和氮的蒸气压温度计。本实验将西蒙气体温度计和氮蒸气压温度计的感温泡热学上连结在一起,共同浸入盛有液氮的杜瓦瓶中,进行低温实验的温度测量。若同时置放真实样品,在改变温度并满足热平衡的条件下,即可获得被测样品的物理特性的温度响应,例如置入高临界温度超导材料,可以获得该材料的临界电流-温度特性。

### 2 实验目的

通过实验了解气体温度计和蒸气压温度计的测温原理,学习利用这两种温度计测量低温温度的 技术及误差分析,掌握低温物理实验中常用的减压降温及恒压控温的技术。

## 3 实验仪器

杜瓦瓶、抽气系统。

## 4 实验原理

#### 4.1 西蒙气体温度计的结构和原理

如图 (1) 所示, 西蒙气体温度计由三部分组成:

- 1. 感温泡。用紫铜加工而成,因紫铜导热性良好,可以改善温泡和待测温物体的热接触。
- 2. 压力指示器。采用弹簧管精密真空表。它有一弹性弯管通过杠杆链接到指针上。当管内气体压力变化时,弹簧管发生形变,带动指针指示相应的真空度,一般情况下弹簧管的体积可认为不变,因而可供制作简单的定容气体温度计。
- 3. 连接感温泡和压力指示器的毛细管。毛细管的作用是充当压力传输管,可选内径为 0.2~0.5mm 的不锈钢管。

将毛细管分别与感温泡及真空表焊接后抽至  $10^{-1}$  帕量级的真空,充入氦气并置换几次,最后封入少量氦气,理想气体状态方程为

$$pV_m = RT (1)$$

式中 p 为气体压力, $V_m$  为气体摩尔体积,T 为绝对温度,R 为普适气体常数。在本实验中,以 V 代表感温泡的体积,V' 代表真空表内弹簧管的体积,以及附加的密封铅管管道的体积(总称"死体积")。 $p_0$  代表室温  $T_0$  时气体温度计内气体压力。忽略毛细管的体积,则当感温泡浸入液氮中,温泡内气体温度下降至 T,压力亦相应变为 p,由 (1) 式应有

$$\frac{pV'}{T_0} + \frac{pV}{T} = \frac{p_0V'}{T_0} + \frac{p_0V}{T_0} = nR = \sharp \mathfrak{B}$$
 (2)

式中 n 为温度计内的气体的摩尔数。由 (2) 式可得

$$T = \frac{\alpha T_0 p}{(1+\alpha)p_0 - p} \tag{3}$$

其中  $\alpha=V/V'$ 。如果 V' 和 V 两者之一或两者都不知道,可由 (3) 式写成另外一种形式

$$\alpha = \frac{(p - p_0)T}{p_0T - pT_0} \tag{4}$$

而求得。例如由其他温度计测得室温后,在温泡未置入低温温区之前,读出真空表相应于室温  $T_0$  的  $p_0$ ,再读出感温泡置于液氮沸点 T(已知) 时真空表读数 p,立即可定出。也可以将 (2) 式写成另外的形式:

$$\frac{1}{T}(VT_0) + V' = \frac{1}{p}(p_0'V + p_0V) \tag{5}$$

式中  $\frac{1}{T}$  与  $\frac{1}{p}$  的关系为一直线方程。若令

$$\beta = \frac{p_0(V + V')}{VT_0}, \ \theta = \frac{V'}{VT_0} \tag{6}$$

则有

$$\frac{1}{T} = \beta \frac{1}{p} - \theta \tag{7}$$

只要求出和,利用作图法可以方便的建立 p-T 关系。

以上讨论的是理想气体的情形。实际为照顾真空表的读数范围,实验中所充的氦气并没有稀薄 到完全可以忽略。考虑到真空气体中第二维里系数项所产生的影响,气体状态方程应为

$$pV_m = RT + Bp (8)$$

比较(1)式和(8)式,温度的修正项为

$$\Delta T = -\frac{Bp}{R} \tag{9}$$

第二维里系数 B 的值和温度有关。

造成西蒙气体温度计的误差有多方面的因素,如真空表读数误差,热分子压差效应引起的误差,温泡体积热胀冷缩变化,处于温度梯度内的毛细管体积对值的影响等。其中真空表读数不精确是主要来源,估算时可将(2)式两边对p求偏导数,得到由于压力读数误差 $\Delta p$ 而引起地误差为

$$\Delta T = T \left( 1 + \frac{T}{\alpha T_0} \right) \frac{\Delta p}{p} \tag{10}$$

其中 p 的值相对于精密真空表而言为 333.3 帕。若预先对准精密真空表的刻线进行压力标定,可使 p 值缩小为 133.32 帕。

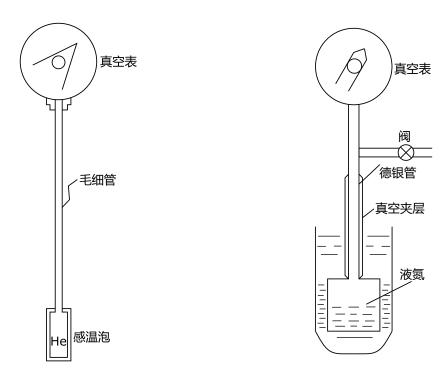


图 1: 西蒙气体温度计示意图

图 2: 氮蒸汽压温度计示意图

#### 4.2 蒸气压温度计

如果我们借助于一台抽气机降低液体表面上的蒸气压,那么由于表面蒸气压的降低,会导致液体内部一些动能较大的分子逸出液面被抽气机抽走,从而使液体的平均动能降低,也就是说降低了液体的温度。根据热力学的相平衡理论,单元两相系在相平衡时温度和压力之间存在一一对应的关系,为获得表达液体的这种关系的蒸气压方程,可对克劳修斯-克拉贝龙 (Clausius-Clapeyron) 方程积分,积分后的系数要借助于气体温度计来标定。对于氮蒸气压温度计,其饱和蒸气压与温度的关系为

$$\lg p = 7.781845 - \frac{341.619}{T} - 0.0062649T \tag{11}$$

一般来说重力场及环境温度变化对其引起的偏离很小。

图 (2) 为本实验所用的氮蒸气压温度计。它由一浸于液氮中待测温区的温泡和置于杜瓦瓶上方的精密真空表以及连接这两者的德银管组成。温泡内充以一定量的纯净液氮;带有真空夹层的德银管作为传递压力的管道;精密真空表用来指示感温泡内液氮蒸气的压力。对于纯净液体的缓慢降温过程,液体上部先冷,下部较热,在重力作用下产生自然对流,能使温度较快达到平衡。这时测得的温度可以认为就是浸于液氮中待测样品的温度。

## 5 实验内容

1. 制作氮蒸气压温度计。对氮气皮囊 10 充灌 99.9% 以上纯度的氮气,并夹紧夹子  $V_4$ 。调整  $V_2$  使得蒸气压温度计与抽气机之间处于连通状态而与其他通路处于关闭状态。启动机械真空泵,此时真空表 5 将指出相应的真空度。关闭阀门  $V_2$ ,观察真空表 5 的指针,真空度应无明显变化。若真空表 5 指示的真空度明显下降,则应进行漏气检查。确定氮蒸气压温度计及其连接管道无漏气后即可松开夹子  $V_4$ ,此时纯氮气进入氮蒸气压温度计的各部位,准备工作完毕。

- 2. 记下室温、大气压力及真空表 6 的读数,应该注意到目前市售的真空表大多指示的是大气压力与真空表内压力之差。
- 3. 将贮存于液氮贮藏罐内的液氮输入实验杜瓦瓶 1 内。
- 4. 堵住输液孔 15 和出气孔 17,调节阀门  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$  使真空泵只对杜瓦瓶 1 进行抽气。随着杜瓦瓶 1 内蒸气压的降低,蒸气压温度计感温泡 2 内的氮气逐渐液化,使得皮囊 10 内的氮气不断进入感温泡内,直至完全液化,此时氮蒸气压温度计已可供使用。
- 5. 关闭抽气机,对电阻加热器接通电源。此时液氮温度逐渐回升。当真空表 14 指针指示杜瓦瓶内的液氮蒸气压已达大气压力时,停止加热并打开出气孔。
- 6. 测出氮沸点时西蒙气体温度计的读数后,再堵上出气孔 17,然后抽气降温。在降温过程中利用恒压器将压力稳定在待测点后记下真空表 5、6 及 14 的读数,并换算成所测的相应温度。
- 7. 当液氮温度降至氮三相点温度时,通过杜瓦瓶的窥缝观察液氮表面相变情景。
- 8. 利用电阻 8 加热升温,当升温至预定测温点附近时,停止加热,让杜瓦瓶的液氮温度有一个平衡过程,记下西蒙温度计和氮蒸气压温度计数值。然后再升温,测量下一个温度点直至氮沸点。
- 9. 有条件时,可以从输液孔插入一只高临界温度氧化物超导材料,观察其临界电流随温度的变化。

## 6 注意事项

- 1. 应尽量选用较纯液氮, 若液氮不纯,则应注意如下两点。
  - (a) 沸点偏高。此时可借助于由纯净氮气被液化的氮蒸气压温度计校正西蒙气体温度计的参数。
  - (b) 因不纯液氮中的杂志为液氧。其沸点高达 90K,在抽气降温过程中总是沸点较低的液氮蒸 汽被抽走,故而纯度越来越差,降温至氮三相点时观察不到液氮结晶的物理现象,但可以 观察氮、氧混合液体由透明至浑浊粘稠直至固化的物理现象,其固化点温度视液氮的杂质 含量而定,通常为 59K~63K。
- 2. 测量过程中室温及大气压可能会变化,应随时记录并做修正。
- 3. 仔细熟悉三通阀门 V1 及  $V_2$  的各种连通状况,防止误操作。
- 4. 在对杜瓦瓶中的液氮抽气降温时,由于气流通过三通阀门 V1 时的伯努利作用,可能会使乳胶指套 11 猛烈膨胀破裂。为此阀门  $V_3$  应经常处于关闭状态,只在需进一步降温时短暂开启一下,随即关闭。而在降温时,需打开  $V_3$ ,以免乳胶指套膨胀破裂。

- 7 实验数据
- 8 误差分析
- 9 思考题
- 9.1 如何确定西蒙气体温度计感温泡体积 V 与"死体积" V 之比值?
- 9.2 如果输入液氮杜瓦瓶的液氮不纯,如何正确选取氮沸点温度?
- 9.3 氮蒸气压温度计是如何制作的? 试从氮的压力温度状态图分析其制作过程。
- 9.4 本实验的恒压器是怎样工作的?
- 9.5 本实验中观察到哪些相变现象?试描述之。
- 9.6 在抽气降温过程中,利用恒压器能使温度稳定在什么范围?是如何观测的?
- 9.7 在升温测量过程中是如何实现稳态测量的?
- 9.8 定量分析两种温度计因压力表的精度限制所致的测温误差。

## 参考文献

[1] 黄润生. 近代物理实验. 南京大学出版社, 2 edition, 2008.